

Frez Modeli

Kullanım Talimatı

Ürün Adı : Dimei Elmas Frezler

Japon Kodu

Kullanım Amacı : Dental el aletine sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır ve ağızdaki diş veya kemik gibi sert yapıları kesme işlemi için kullanılır. Takma dişlerin diş hekimliğinde uygulanması için dişlerin şekillendirilmesinde de kullanılabilir.

ISO Kodu

Renk Kodu

Avrupa Kodu

DENTAL FREZLERİN STERLİZASYON TALİMATLARI

1-UYARILAR : Frezler alındığında steril değildir ve aşağıdaki talimatlara göre kullanımdan önce sterilize edilmelidir.

Frezler, alkali ve asitli deterjanlardan zarar görebilir.

Frez dezenfektan solusyonu kullanınız.

Frez dezenfektanının kullanım talimatlarına göre dezenfekte ediniz.

Temizleme ve sterilizasyondan önce tüm ambalajı çıkarın.

2-Yeniden İşleme Kısıtlamaları : Bir sonraki işlemlerde frezde performans etkisi daha düşük olabilir.

Sık kullanımda aşınma ve hasar görülebilir.

Bu durumda frezin ömrü bitmiştir ve yeni freze geçiniz.

TALİMATLAR

3-Kullanım Noktası : Ambalajdan çıkardıktan sonra Dezenfekte ediniz. (Uyarılar bölümüne bakınız.)

4-Çevreleme ve Taşıma : Hassas veya ince uçları hasara karşı koruyun. Islak kalan frezler, lekelenebilir veya paslanabilir.

5-Bakım : Hasarlı gördüğünüz frezleri kullanmayınız.

6-Denetleme ve Fonksiyon Testi : Tüm frezler: Tüm kirlenmenin giderildiğinden emin olmak için görsel olarak inceleyin. Hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Kesme kenarları kusursuz olmalıdır. Hasar görmüş veya paslanmış frezeleri tekrar kullanmayınız. Sterilizasyondan sonra renk solması veya matlaşma olduğuna dair kanıt olabilir. Bu tamamen normaldir ve performansı etkilemez.

7-Kurutma : Frezlerin uzun süre ıslak kalması Frezlere zarar verir, bu sebeple ıslak olan Frezleri Kağıt havlu kullanarak veya kuru ısı ile kurutun.

10-Sterilizasyon için Ambalajlama : İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, ön vakumlu otoklavların, Otoklav Poşeti kullanılarak Steril Edilmesi önerilir . Frezler, özel alet tepsilerine veya genel amaçlı sterilizasyon tepsileriyle de Steril edilebilir fakat önerilen yöntem Otoklav Poşeti kullanılmasıdır.

11-Sterilizasyon : Sadece onaylanmış buhar otoklavları kullanın.
134°C'de Sterilizasyon Sıcaklık aralığı (°C), Nominal Basınç (MPa) 2.2, nominal çalışma sıcaklığı ve basınca ulaşıldığında 15-20 dakika bekletme süresi.

Elmas Frezler tekrar kullanmadan önce, su ile temizlenmeli ve en az 20 dakika boyunca %75 alkol ile dezenfekte edilmeli ve daha sonra doğal olarak kurutulmalıdır.


12-Saklama : Kirlenmesini ve Nemli alanlarda kalmasını önleyiniz.

13-İlave Bilgi : Bir otoklav döngüsünde birden fazla frez sterilize ederken üreticilerin belirttiği azami yükün aşılmadığından emin olun. Doğrulanmış ultrasonik banyolar, onaylanmış temizlik maddeleriyle birlikte kullanılabilir. Hem ekipman hem de temizlik maddesi üreticileri tarafından verilen kullanım talimatlarını izleyin.

Bu talimatlar, üretici tarafından yeniden kullanımlık bir cihaz hazırlayabilecek şekilde onaylanmıştır.

Yeniden işlemenin gerçekte istenen sonucu elde etmesini sağlamak, işlemcinin sorumluluğundadır. Bu normalde işlemin doğrulanması ve rutin izlenmesini gerektirir. İşlemcinin bu talimatların herhangi birinden sapması, etkinlik ve olası ters etkiler açısından uygun şekilde değerlendirilmelidir.



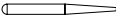







Dime Elmas Frez







314 FG 
Ø 1,6 mm











150-180 µ

Siyah Kuşak-Black Coarse


Renk Kodu: B

 BR-49B	 BR-45B	 BR-46B	 BR-41B	 BR-40B	 BR-31B	 BR-28B	 BR-26B	 BR-25B	 BR-23B
001-008 B	001-010 B	001-012 B	001-014 B	001-016 B	001-018 B	001-021 B	001-023 B	001-025 B	001-029 B
801-008 B	801-010 B	801-012 B	801-014 B	801-016 B	801-018 B	801-021 B	801-023 B	801-025 B	801-029 B

 SI-46B	 SI-47B	 SI-48B	 SI-49B	 SI-..B	 SI-50B
010-012 B	010-014 B	010-016 B	010-018 B	010-021 B	225-14 B
805-012 B	805-014 B	805-016 B	805-018 B	805-021 B	807-014 B

 SF-41B	 SF-31B	 SF-42B	 SF-..B	 SF-21B	 SF-15B	 SF-11B	 SF-12B	 SF-13B	 SF-14B
109-010 B	109-012 B	109-014 B	110-012 B	110-014 B	110-016 B	111-012 B	111-014 B	111-016 B	111-018 B
835-010 B	835-012 B	835-014 B	836-012 B	836-014 B	836-016 B	837-012 B	837-014 B	837-016 B	837-018 B



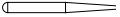







Dime Elmas Frez











314 FG  Ø 1,6 mm




150-180 µ

Siyah Kuşak-Black Coarse


Renk Kodu: B

 SR-20B	 SR-21B	 SR-11B	 SR-12B	 SR-13B	 SR-..B	 SO-..B	 SO-..B	 SO-..B	 SO-..B
140-012 B	140-014 B	141-012 B	141-014 B	141-016 B	141-018 B	131-012 B	131-014 B	131-016 B	131-018 B
880-012 B	880-014 B	881-012 B	881-014 B	881-016 B	881-018 B	886-012 B	886-014 B	886-016 B	886-018 B

 SO-20B	 SO-..B	 SO-21B	 TC-..B	 TC-26B	 TC-..B	 TC-21B	 TC-..B	 TC-09B	 TC-10B
288-012 B	289-012 B	289-014 B	164-010 B	164-012 B	165-012 B	165-014 B	165-016 B	166-012 B	166-014 B
877-012 B	878-012 B	878-014 B	852-010 B	852-012 B	858-012 B	858-014 B	858-016 B	859-012 B	859-014 B

 TC-11B	 TC-16B	 TC-L18B
166-016 B	166-018 B	166-L18 B
859-016 B	859-018 B	859-L18 B



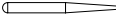







Dime Elmas Frez











314 FG  Ø 1,6 mm











150-180 µ

Siyah Kuşak-Black Coarse


Renk Kodu: B

									
TF-20B	TF-21B	TF-09B	TF-10B	TF-14B	TF-11B	TF-12B	TF-13B	CR-11B	TR-20B
171-014 B	171-016 B	172-014 B	172-016 B	172-023 B	173-014 B	173-016 B	173-018 B	196-020 B	197-014 B
846-014 B	846-016 B	847-014 B	847-016 B	847-023 B	848-014 B	848-016 B	848-018 B	849-020 B	855-014 B

									
TR-21B	TR-63B	TR-.B	TR-25B	TR-24B	TR-23B	TR-.B	TR-11B	TR-12B	TR-13B
197-016 B	197-020 B	198-012 B	198-014 B	198-016 B	198-018 B	199-012 B	199-014 B	199-016 B	199-018 B
855-016 B	855-020 B	856-012 B	856-014 B	856-016 B	856-018 B	850-012 B	850-014 B	850-016 B	850-018 B

									
TR-14B	TR-15B	TR-19B	FO-41B	FO-20B	FO-.B	FO-16B	FO-21B	FO-22B	FO-.B
199-022 B	200-022 B	200-024 B	248-012 B	248-014 B	249-012 B	249-013 B	249-014 B	249-016 B	249-018 B
850-022 B	850L-022 B	850L-024 B	861-012 B	861-014 B	862-012 B	862-013 B	862-014 B	862-016 B	862-018 B



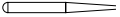







Dime Elmas Frez











314 FG  Ø 1,6 mm





150-180 µ

Siyah Kuşak-Black Coarse


Renk Kodu: B

									
FO-11B	FO-12B	FO-..B	FO-13B	FO-..B	FO-14B	FO-30B	FO-32B	FO-29B	FO-..B
250-012 B	250-014 B	250-016 B	250-017 B	250-018 B	250-023 B	257-016 B	257-018 B	257-019 B	257-021 B
863-012 B	863-014 B	863-016 B	863-017 B	863-018 B	863-023 B	368-016 B	368-018 B	368-019 B	368-021 B

									
FO-34B	FO-25B	FO-27B	TR-22B	TR-..B	TR-28B	EX-11B	EX-12B	EX-20B	EX-21B
257-023 B	257-028 B	257-032 B	277-020 B	277-022 B	277-032 B	038-032 B	039-035 B	237-018 B	237-021 B
368-023 B	368-028 B	368-032 B	379-020 B	379-022 B	379-032 B	811-032 B	811L-035 B	830-018 B	830-021 B

			
EX-18B	BC-11B	BC-12B	198C-016 B
150-012 B	515-014 B	519-016 B	198C-016 B
839-012 B	839-014 B		






Dime Elmas Frez

314 FG  Ø1,6 mm

150-180 µ







Siyah Kuşak-Black Coarse

Renk Kodu: B


 WR-13B	 WR-44B	 WR-45B	 WR-48B	 WR-49B
068-042 B	055-045 B	042-040 B	304-038 B	304-050 B
909-042 B	824-042 B	822-040 B	825-038 B	825-050 B

25 mm Uzun Şaft

Ø1.6mm 

 BR-X45B	 BR-X46B	 BR-X41B	 BR-X40B	 BR-X31B	 BR-X28B
001-X010 B	001-X012 B	001-X014 B	001-X016 B	001-X018 B	001-X021 B
801-X010 B	801-X012 B	801-X014 B	801-X016 B	801-X018 B	801-X021 B



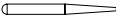







Dime Elmas Frez







314 FG 
Ø 1,6 mm











125-150 µ

Yeşil Kuşak-Green Coarse


Renk Kodu: C

 BR-49C	 BR-45C	 BR-46C	 BR-41C	 BR-40C	 BR-31C	 BR-28C	 BR-26C	 BR-25C	 BR-23C
001-008 C	001-010 C	001-012 C	001-014 C	001-016 C	001-018 C	001-021 C	001-023 C	001-025 C	001-029 C
801-008 C	801-010 C	801-012 C	801-014 C	801-016 C	801-018 C	801-021 C	801-023 C	801-025 C	801-029 C

 SI-46C	 SI-47C	 SI-48C	 SI-49C	 SI-..C	 SI-50C
010-012 C	010-014 C	010-016 C	010-018 C	010-021 C	225-14 C
805-012 C	805-014 C	805-016 C	805-018 C	805-021 C	807-014 C

 SF-41C	 SF-31C	 SF-42C	 SF-..C	 SF-21C	 SF-15C	 SF-11C	 SF-12C	 SF-13C	 SF-14C
109-010 C	109-012 C	109-014 C	110-012 C	110-014 C	110-016 C	111-012 C	111-014 C	111-016 C	111-018 C
835-010 C	835-012 C	835-014 C	836-012 C	836-014 C	836-016 C	837-012 C	837-014 C	837-016 C	837-018 C











Dime Elmas Frez











314 FG  Ø 1,6 mm




125-150 µ

Yeşil Kuşak-Green Coarse


Renk Kodu: C

 SR-20C	 SR-21C	 SR-11C	 SR-12C	 SR-13C	 SR-..C	 SO-..C	 SO-..C	 SO-..C	 SO-..C
140-012 C	140-014 C	141-012 C	141-014 C	141-016 C	141-018 C	131-012 C	131-014 C	131-016 C	131-018 C
880-012 C	880-014 C	881-012 C	881-014 C	881-016 C	881-018 C	886-012 C	886-014 C	886-016 C	886-018 C

 SO-20C	 SO-..C	 SO-21C	 TC-..C	 TC-26C	 TC-..C	 TC-21C	 TC-..C	 TC-09C	 TC-10C
288-012 C	289-012 C	289-014 C	164-010 C	164-012 C	165-012 C	165-014 C	165-016 C	166-012 C	166-014 C
877-012 C	878-012 C	878-014 C	852-010 C	852-012 C	858-012 C	858-014 C	858-016 C	859-012 C	859-014 C

 TC-11C	 TC-16C	 TC-L18C
166-016 C	166-018 C	166-L18 C
859-016 C	859-018 C	859-L18 C











Dime Elmas Frez











314 FG  Ø 1,6 mm











125-150 µ

Yeşil Kuşak-Green Coarse


Renk Kodu: C

									
TF-20C	TF-21C	TF-09C	TF-10C	TF-14C	TF-11C	TF-12C	TF-13C	CR-11C	TR-20C
171-014 C	171-016 C	172-014 C	172-016 C	172-023 C	173-014 C	173-016 C	173-018 C	196-020 C	197-014 C
846-014 C	846-016 C	847-014 C	847-016 C	847-023 C	848-014 C	848-016 C	848-018 C	849-020 C	855-014 C

									
TR-21C	TR-63C	TR-..C	TR-25C	TR-24C	TR-23C	TR-..C	TR-11C	TR-12C	TR-13C
197-016 C	197-020 C	198-012 C	198-014 C	198-016 C	198-018 C	199-012 C	199-014 C	199-016 C	199-018 C
855-016 C	855-020 C	856-012 C	856-014 C	856-016 C	856-018 C	850-012 C	850-014 C	850-016 C	850-018 C

									
TR-14C	TR-15C	TR-19C	FO-41C	FO-20C	FO-..C	FO-16C	FO-21C	FO-22C	FO-..C
199-022 C	200-022 C	200-024 C	248-012 C	248-014 C	249-012 C	249-013 C	249-014 C	249-016 C	249-018 C
850-022 C	850L-022 C	850L-024 C	861-012 C	861-014 C	862-012 C	862-013 C	862-014 C	862-016 C	862-018 C











Dime Elmas Frez




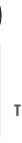






314 FG 
Ø 1,6 mm





125-150 µ

Yeşil Kuşak-Green Coarse


Renk Kodu: C

 FO-11C	 FO-12C	 FO-..C	 FO-13C	 FO-..C	 FO-14C	 FO-30C	 FO-32C	 FO-29C	 FO-..C
250-012 C	250-014 C	250-016 C	250-017 C	250-018 C	250-023 C	257-016 C	257-018 C	257-019 C	257-021 C
863-012 C	863-014 C	863-016 C	863-017 C	863-018 C	863-023 C	368-016 C	368-018 C	368-019 C	368-021 C

 FO-34C	 FO-25C	 FO-27C	 TR-22C	 TR-..C	 TR-28C	 EX-11C	 EX-12C	 EX-20C	 EX-21C
257-023 C	257-028 C	257-032 C	277-020 C	277-022 C	277-032 C	038-032 C	039-035 C	237-018 C	237-021 C
368-023 C	368-028 C	368-032 C	379-020 C	379-022 C	379-032 C	811-032 C	811L-035 C	830-018 C	830-021 C

 EX-18C	 BC-11C	 BC-12C	 198C-016 C
150-012 C	515-014 C	519-016 C	198C-016 C
839-012 C	839-014 C		



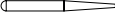


Dime Elmas Frez

314 FG 
Ø 1,6 mm

125-150 µ







Yeşil Kuşak-Green Coarse

Renk Kodu: C


 WR-13C	 WR-44C	 WR-45C	 WR-48C	 WR-49C
068-042 C	055-045 C	042-040 C	304-038 C	304-050 C
909-042 C	824-042 C	822-040 C	825-038 C	825-050 C

25 mm Uzun Şaft

Ø1.6mm 

 BR-X45C	 BR-X46C	 BR-X41C	 BR-X40C	 BR-X31C	 BR-X28C
001-X010 C	001-X012 C	001-X014 C	001-X016 C	001-X018 C	001-X021 C
801-X010 C	801-X012 C	801-X014 C	801-X016 C	801-X018 C	801-X021 C



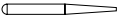







Dime Elmas Frez











314 FG 
Ø 1,6 mm









60 µ

Kırmızı Kuşak-Red Coarse


Renk Kodu: F

									
BR-45F	BR-46F	BR-40F	SF-..F	SF-..F	SF-11F	SF-12F	SR-..F	SR-11F	SR-12F
001-010 F	001-012 F	001-016 F	110-012 F	111-010 F	111-012 F	111-014 F	141-010 F	141-012 F	141-014 F
801-010 F	801-012 F	801-016 F	836-012 F	837-010 F	837-012 F	837-014 F	881-010 F	881-012 F	881-014 F

									
SR-13F	EX-18F	SO-..F	SO-..F	SO-21F	TC-..F	TC-26F	TC-..F	TC-..F	TC-21F
141-016 F	150-012 F	289-010 F	289-012 F	289-014 F	164-010 F	164-012 F	165-010 F	165-012 F	165-014 F
881-016 F	839-012 F	878-010 F	878-012 F	878-014 F	852-010 F	852-012 F	858-010 F	858-012 F	858-014 F

							
TC-09F	TC-10F	TC-11F	CR-11F	TR-20F	TR-11F	TR-12F	TR-13F
166-012 F	166-014 F	166-016 F	196-020 F	197-014 F	199-014 F	199-016 F	199-018 F
859-012 F	859-014 F	859-016 F	849-020 F	855-014 F	850-014 F	850-016 F	850-018 F



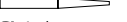





Dimei Elmas Frez

314 FG 
Ø 1,6 mm


60 µ

Kırmızı Kuşak-Red Coarse

Renk Kodu: F

 FO-20F	 FO-21F	 FO-22F	 FO-30F	 FO-32F	 FO-34F	 TR-..F	 EX-21F
248-014 F	249-014 F	249-016 F	257-016 F	257-018 F	257-023 F	277-022 F	237-021 F
861-014 F	862-014 F	862-016 F	368-016 F	368-018 F	368-023 F	379-022 F	830-021 F



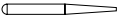







Dime Elmas Frez











314 FG 
Ø 1,6 mm











28 µ

Sarı Kuşak-Yellow Coarse


Renk Kodu: EF

									
BR-40EF	BR-31EF	BR-28EF	SF-11EF	SF-12EF	SF-13EF	SR-11EF	SR-12EF	SO-..EF	SO-..EF
001-016 EF	001-018 EF	001-021 EF	111-012 EF	111-014 EF	111-016 EF	141-012 EF	141-014 EF	289-010 EF	289-012 EF
801-016 EF	801-018 EF	801-021 EF	837-012 EF	837-014 EF	837-016 EF	881-012 EF	881-014 EF	278-010 EF	278-012 EF

									
SO-21EF	TC-26EF	TC-..EF	TC-..EF	TC-21EF	TC-..EF	TC-09EF	TC-10EF	TC-11EF	TC-16EF
289-014 EF	164-012 EF	165-010 EF	165-012 EF	165-014 EF	165-016 EF	166-012 EF	166-014 EF	166-016 EF	166-018 EF
278-014 EF	852-012 EF	858-010 EF	858-012 EF	858-014 EF	858-016 EF	859-012 EF	859-014 EF	859-016 EF	859-018 EF

									
TF-21EF	TR-11EF	TR-12EF	TR-13EF	FO-41EF	FO-20EF	FO-21EF	FO-22EF	FO-11EF	FO-..EF
171-016 EF	199-014 EF	199-016 EF	199-018 EF	248-012 EF	248-014 EF	249-014 EF	249-016 EF	250-012 EF	250-018 EF
846-016 EF	850-014 EF	850-016 EF	850-018 EF	861-012 EF	861-014 EF	862-014 EF	862-016 EF	863-012 EF	863-018 EF



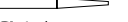







Dime Elmas Frez

314 FG 
Ø 1,6 mm

28 µ

Sarı Kuşak-Yellow Coarse

Renk Kodu: EF

 EX-21EF	 EX-26EF	 FO-30EF	 FO-32EF	 FO-29EF	 FO..EF	 FO-34EF	 FO-25EF	 FO-27EF	 TR-..EF
237-021 EF	237-032 EF	257-016 EF	257-018 EF	257-019 EF	257-021 EF	257-023 EF	257-028 EF	257-032 EF	277-022 EF
830-021 EF	830-032 EF	368-016 EF	368-018 EF	368-019 EF	368-021 EF	368-023 EF	368-028 EF	368-032 EF	279-022 EF

MODELE GÖRE FREZ ÖLÇÜLERİ VE MAKSİMUM HIZLARI

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
001-008	0,8	0,8	19,0	450.000
801-008				
001-010	1,0	1,0	19,0	450.000
801-010				
001-012	1,2	1,2	19,0	450.000
801-012				
001-014	1,4	1,4	19,0	450.000
801-014				
001-016	1,6	1,6	19,0	450.000
801-016				
001-018	1,8	1,8	19,0	450.000
801-018				
001-021	2,1	2,1	19,0	450.000
801-021				
001-023	2,5	2,5	19,0	300.000
801-023				
001-025	2,5	2,5	19,0	160.000
801-025				
001-029	2,9	2,9	19,0	160.000
801-029				

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
010-012	1,2	1,2	19,0	450.000
805-012				
010-014	1,4	1,4	19,0	450.000
805-014				
010-016	1,6	1,8	19,0	450.000
805-016				
010-018	1,8	1,8	19,0	450.000
805-018				
010-021	2,1	2,3	19,0	300.000
805-021				
225-014	1,4	4,0	19,0	300.000
807-014				
109-10	1,2	4,0	19,0	450.000
835-10				
109-12	1,2	4,0	19,0	450.000
835-12				
109-14	1,4	4,0	19,0	450.000
835-14				
110-12	1,2	6,0	21,0	450.000
836-12				

MODELE GÖRE FREZ ÖLÇÜLERİ VE MAKSİMUM HIZLARI

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
110-14	1,4	6,0	21,0	450.000
836-14				
110-16	1,6	6,0	21,0	450.000
836-16				
111-12	1,2	8,0	22,0	450.000
837-12				
111-14	1,4	8,0	22,0	450.000
837-14				
111-16	1,6	8,0	22,0	450.000
837-16				
111-18	1,8	8,0	22,0	450.000
837-18				
140-12	1,2	6,0	21,0	300.000
880-12				
140-14	1,4	6,0	21,0	300.000
880-14				
141-12	1,2	8,0	22,0	300.000
881-12				

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
141-14	1,4	8,0	22,0	300.000
881-14				
141-16	1,6	8,0	22,0	300.000
881-16				
141-18	1,8	8,0	22,0	300.000
881-18				
131-12	1,2	10,0	22,0	300.000
886-12				
131-14	1,4	10,0	22,0	300.000
886-14				
131-16	1,6	10,0	22,0	300.000
886-16				
131-18	1,8	10,0	22,0	300.000
886-18				
288-012	1,2	6,0	21,0	300.000
877-012				
289-12	1,2	8,0	21,0	300.000
878-12				

MODELE GÖRE FREZ ÖLÇÜLERİ VE MAKSİMUM HIZLARI

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
289-14	1,4	8,0	21,0	300.000
878-14				
164-10	1,0	6,0	21,0	300.000
852-10				
164-12	1,2	6,0	21,0	300.000
852-12				
165-12	1,2	8,0	22,0	300.000
858-12				
165-14	1,4	8,0	22,0	300.000
858-14				
165-16	1,6	8,0	22,0	300.000
858-16				
166-12	1,2	10,0	24,0	300.000
859-12				
166-14	1,4	10,0	24,0	300.000
859-14				
166-16	1,6	10,0	24,0	300.000
859-16				

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
166-18	1,8	10,0	24,0	300.000
859-18				
166-L18	1,8	12,0	24,0	300.000
859-L18				
171-14	1,4	6,0	21,0	300.000
846-14				
171-16	1,6	6,0	21,0	300.000
846-16				
172-14	1,4	8,0	22,0	300.000
847-14				
172-16	1,6	8,0	22,0	300.000
847-16				
172-23	2,3	8,0	22,0	300.000
847-23				
173-14	1,4	10,0	24,0	300.000
848-14				
173-16	1,6	10,0	24,0	300.000
848-16				

MODELE GÖRE FREZ ÖLÇÜLERİ VE MAKSİMUM HIZLARI

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
173-18	1,8	10,0	24,0	300.000
848-18				
196-20	2,0	5,0	19,0	300.000
849-20				
197-14	1,4	6,0	21,0	300.000
855-14				
197-16	1,6	6,0	21,0	300.000
855-16				
197-20	2,0	6,0	21,0	300.000
855-20				
198-12	1,2	8,0	22,0	300.000
856-12				
198-14	1,4	8,0	22,0	300.000
856-14				
198-16	1,6	8,0	22,0	300.000
856-16				
198-18	1,8	8,0	22,0	300.000
856-18				

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
199-12	1,2	10,0	24,0	300.000
850-12				
199-14	1,4	10,0	24,0	300.000
850-14				
199-16	1,6	10,0	24,0	300.000
850-16				
199-18	1,8	10,0	24,0	300.000
850-18				
199-22	2,2	10,0	24,0	300.000
850-22				
200-22	2,2	11,5	24,0	300.000
850L-22				
200-24	2,4	11,5	24,0	300.000
850L-24				
248-12	1,2	6,0	21,0	300.000
861-12				
248-14	1,4	6,0	21,0	300.000
861-14				

MODELE GÖRE FREZ ÖLÇÜLERİ VE MAKSİMUM HIZLARI

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
249-12	1,2	8,0	22,0	300.000
862-12				
249-13	1,3	8,0	22,0	300.000
862-13				
249-14	1,4	8,0	22,0	300.000
862-14				
249-16	1,6	8,0	22,0	300.000
862-16				
249-18	1,8	8,0	22,0	300.000
862-18				
250-12	1,2	10,0	24,0	300.000
863-12				
250-14	1,4	10,0	24,0	300.000
863-14				
250-16	1,6	10,0	24,0	300.000
863-16				
250-17	1,7	10,0	24,0	300.000
863-17				

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
250-18	1,8	10,0	24,0	300.000
863-18				
250-23	2,3	10,0	24,0	300.000
863-23				
257-16	1,6	3,6	20,0	300.000
368-16				
257-18	1,8	3,6	20,0	300.000
368-18				
257-19	1,9	4,5	19,0	450.000
368-19				
257-21	2,1	5,0	20,0	300.000
368-21				
257-23	2,3	5,0	20,0	300.000
368-23				
257-28	2,8	4,8	19,0	160.000
368-28				
257-32	3,2	4,8	20,0	160.000
368-32				

MODELE GÖRE FREZ ÖLÇÜLERİ VE MAKSİMUM HIZLARI

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
277-20	2,0	3,9	19,0	160.000
379-20				
277-22	1,3	3,9	19,0	160.000
379-22				
277-32	3,2	5,0	19,0	160.000
277-32				
038-32	3,2	5,0	19,0	160.000
811-32				
039-35	3,5	7,0	20,0	160.000
881L-035				
237-18	1,8	5,0	19,0	300.000
830-18				
237-21	2,1	5,0	19,0	300.000
830-21				
068-42	4,2	1,8	19,0	160.000
909-42				
055-45	4,5	2,0	19,0	160.000
824-42				

	Kafa Çapı mm	Kafa Uzunluğu mm	Frez Uzunluğu mm	Maksimum Hız rpm
042-40	4,0	2,0	19,0	160.000
822-40				
304-38	3,8	1,2	19,0	160.000
825-038				
304-50	5,0	1,8	19,0	160.000
825-50				
001-x10	1,0	1,0	25,0	300.000
801-x10				
001-x12	1,2	1,2	25,0	300.000
801-x12				
001-x14	1,4	1,4	25,0	300.000
801-x14				
001-x16	1,6	1,6	25,0	300.000
801-x16				
001-x18	1,8	1,8	25,0	300.000
801-x18				
001-x21	2,1	2,1	25,0	300.000
801-x21				